

Segmentielle Darstellung für eine präzise Betrachtung selbst einzelner Körperregionen

EXAKTE ERGEBNISSE UND SEGMENTANALYSE DANK

Überkreuzmessung

## Diagnosewaage für ein neues Körpergefühl

Die BF 1000 Super Precision liefert Ihnen alles, was Sie sich für eine umfangreiche Gewichtskontrolle wünschen. Mithilfe einer speziellen Überkreuzmessung kann eine präzise Ganzkörperanalyse erstellt werden. Das erhöhte Display auf der Aluminium-Stele und die edle Trittpläche mit ITO\*-Beschichtung ermöglichen eine Messung wie beim Profi!

\*(ITO = Indium Tin Oxide / Indium Zinn Oxid)



»Meine Erfahrung zeigt, dass Lebensstilumstellung mit Sport und geänderter Ernährung auf normalen Waagen oft nicht sichtbar ist und daher zum Abbruch führt. Mit Bioimpedanzwaagen sehe ich die Zunahme der Muskel- und Abnahme der Fettmasse und bleibe motiviert.«

Prof. Dr. Thomas Kurscheid

## Diagnosewaage BF 1000 Super Precision

Die BF 1000 Super Precision punktet mit cleveren Features, die Erfolge beim Sport oder Abnehmen ganz einfach messbar machen.

- Wie beim Profi: erhöhtes Dot-Matrix-Display auf Aluminium-Stele mit blauer Beleuchtung für beste Lesbarkeit
- Anzeige von Körpergewicht, Körperfettanteil (inkl. Viszeralfett), Körperwasser- und Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige, BMR und AMR
- Segmentielle Darstellung einzelner Körperteile (Arme, Beine, Rumpf) dank Überkreuzmessung mit 8 Elektroden
- 10 Benutzerspeicher à 30 Messwertspeicher + Gastmodus
- Anbindung an die kostenfreie „beurer HealthManager“ App
- Extra stabil: für 200 kg Tragkraft mit 50g-genauer Einteilung
- 5 Jahre Garantie

Die App und Software, die zum Download bereit stehen, können von den Abbildungen abweichen. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Beurer GmbH, Postfach 1427, 89004 Ulm, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany  
Tel. +49 731/39 89-0, Fax. +49 731/39 89-139, [vertrieb@beurer.de](mailto:vertrieb@beurer.de)

[www.beurer.com](http://www.beurer.com) [www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com)



beurer



Im Bilde über jede Körperzone - Die Profiwaage für zu Hause

## DIAGNOSEWAAGE BF 1000 SUPER PRECISION

Für eine detaillierte Ganzkörperanalyse

german engineering

759.213\_0819 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

# Wozu Körperfett messen?



Unser Körpergewicht ist wichtig für unsere Gesundheit. Nicht nur für Sportler spielt das Verhältnis von Muskel- und Fettanteil eine entscheidende Rolle. Eine regelmäßige Kontrolle ist vor allem dann sinnvoll, wenn es um den Trainingserfolg und das Abnehmen geht oder aber um Über- und Untergewicht sowie daraus resultierenden Krankheiten vorzubeugen.

**Erfolgskontrolle beim Fitness- und Krafttraining**  
Ausdauer- oder Kraftsportler möchten es oftmals ganz genau wissen. Neben den reinen Gewichtsdaten ist der Status über die Zusammensetzung von Muskel- und Fettgewebe bedeutend, um das Workout auf die aktuelle Situation des Athleten abzustimmen.

**Erfolgskontrolle bei einer Diät**  
Wer bei einer Diät motiviert bleiben will, möchte erfahren, wie viel Fett im Körper abgebaut wurde. Die Analyse von Fett- und Muskelanteil kann helfen, Ernährungspläne auf dem Weg zu einem gesunden Körpergefühl besser abzustimmen.

**Ist mein Körperfettanteil gesund?**  
Eine schlanke Silhouette ist leider kein Garant für dauerhafte Gesundheit. Die Analyse des Viszeralfetts (Bauchfett/Organfett) gibt eine besonders wichtige Rückmeldung, denn selbst in einem optisch gesunden Körper können sich vermehrt Fettzellen in der Körpermitte anhäufen, die mit gesundheitlichen Risiken verbunden sind.



## Ganzkörperanalyse wie beim Profi

Mit der BF 1000 Super Precision sind Sie jederzeit im Bilde über Ihre Gewichtswerte. Für die spezielle Überkreuzmessung sind in die Diagnosewaage acht Elektroden für Hände und Füße eingearbeitet. Dadurch liefert sie besonders genaue Ergebnisse.


Neben dem Körpergewicht ermittelt die BF 1000 Super Precision auch Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse und liefert Hinweise auf Ihren Kalorienbedarf.

Selbst das Viszeralfett wird mit angezeigt. Das Viszeralfett umschließt die inneren Organe in der Bauchhöhle. Dieses Bauch-/Organfett steht im Verdacht, Krankheiten wie Bluthochdruck, Gefäßablagerungen oder Diabetes zu begünstigen.

Gewicht 	Körperfett 	Viszeralfett 	Körperwasser 
Muskelanteil 	Knochenmasse 	BMI 	BMR/AMR (kcal) 

## So genau wussten Sie noch nie über Ihren Körper Bescheid

Darüber hinaus bietet die BF 1000 Super Precision eine detaillierte Segmentanalyse. Sie gibt zusätzlich Aufschluss über den Fett- und Muskelanteil einzelner Körperzonen wie zum Beispiel linker Arm, rechtes Bein oder Rumpf.

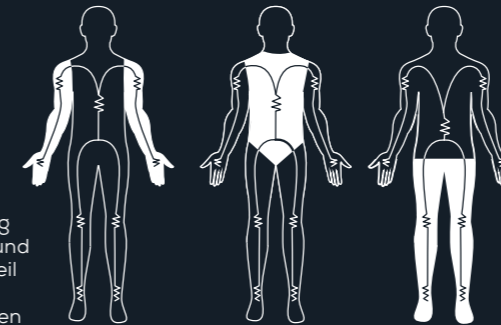


Darstellung von Fett- und Muskelanteil nach Körperzonen

Über grafische Auswertungen im modernen Dot-Matrix-Display können Sie Ihre Körperwerte leicht interpretieren und über die App lückenlos verfolgen.



## Alle Werte langfristig im Blick

Die BF 1000 Super Precision ist mit der kostenfreie «beurer HealthManager» App kompatibel. Per Bluetooth® lassen sich alle Daten problemlos von der Waage auf das Smartphone oder Tablet übertragen. So haben Sie Ihre Körperwerte jederzeit im Blick und können Ihr Wunschgewicht oder Trainingsziele spielend leicht erreichen.

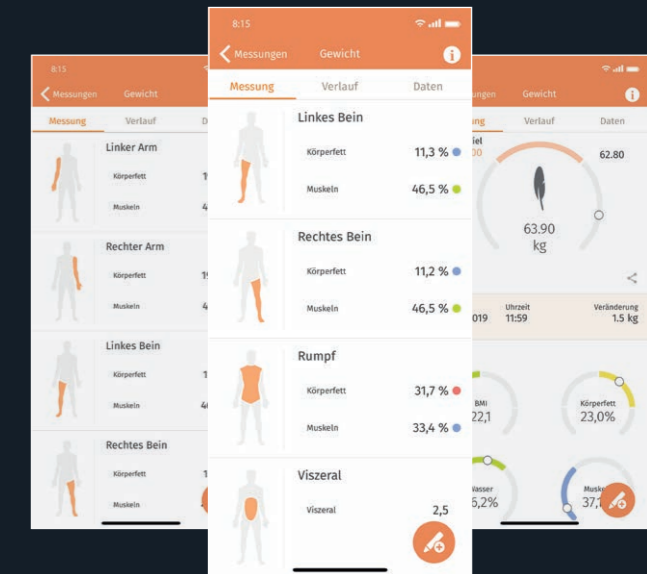

Die „beurer HealthManager“ App – ein komplettes System für Ihr Gesundheits-Monitoring